

Conox
Intelligente Narkoseüberwachung

Die verlässliche und portable zwei in eins Lösung

- Der qCON-Index liefert einen schnellen klinischen Status der Narkosetiefe des Patienten.
- Der qNOX-Index ermöglicht eine schnelle Messung der analgetischen Komponente als prognostischer Wert für eine Reaktion auf Schmerzreize.
- Ergänzende Parameter, wie z.B. BSR oder EMG, werde nebenfalls zur Verfügung gestellt, um umfassendere Informationen über den Zustand des Patienten zu erhalten.
- Für Kinder und Erwachsene einsetzbar bei Vollnarkose im OP und auf der Intensivstation.



Benutzerfreundlich

- Indizes von 0 bis 99
- Touchscreen mit Zugang zu Überwachungsfunktionen
- Impedanzprüfung des Sensors bei Bedarf und automatisch alle 15 min
- Akustischer und visueller Alarm für den qCON-Index
- Speicherung und Visualisierung der Fälle
- Darstellung des Spektogramms

Zuverlässig und stabil

- Schnelle Erkennung von Veränderungen des Bewusstseinszustands bei Patienten.
- Stabile und zuverlässige Überwachung, unterstützt das medizinische Fachpersonal, die mit der Narkose verbundenen Risiken zu reduzieren.

Tragbar

- Kompaktes und leichtes Design
- Akkulaufzeit: 1h30
- Einfache Befestigung mit einer 360° Stabklemme
- Bluetooth® Verbindung
- Verbindung von Conox mit mit Windows-, Android- und iOS (ConoxView app)

FRESENIUS KABI
Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4
6010 Kriens
Telefon 041 552 70 00
www.fresenius-kabi.ch
info.ch@fresenius-kabi.com

Referenzen

1. J.F. Valencia, X. Borrat and PL. Gambús, "Validation of a new index, qCON, for assessment of the level of consciousness during sedation", presented at the ASA Annual meeting, Abstract A640, Oct 2012.
2. J.F. Valencia, X. Borrat, M. Struys and H. Vereecke, "Assessment of the level of consciousness during propofol anaesthesia: validation of the qCON index", European Journal of Anaesthesiology, vol. 30, e-Sup. 51, p. 42, Abstract 3AP2-6, Jun 2013.
3. E.W. Jensen, PL. Gambús, P. Pineda, J.F. Valencia, M. Jospin, M.M.R.F. Struys and H.E.M. Vereecke, "Prediction of response to tetanic stimulation: what is best, an interaction model or a direct brain measurement?", European Journal of Anaesthesiology, vol. 31, e-Sup. 52, p. 32, Abstract Ap2-1, Jun 2014.
4. E.W. Jensen, J.F. Valencia, A. López, T. Anglada, M. Agustí, Y. Ramos, R. Serra, M. Jospin, P. Pineda and P. Gambús, "Monitoring hypnotic effect and nociception with two EEG-derived indices, qCON and qNOX, during general anaesthesia", Acta Anaesthesiologica Scandinavica, vol. 58(8), pp. 933-941, Sep 2014.
5. P. Pineda, E.W. Jensen, M. Jospin and P. Gambús, "Comparison of the reliability and stability of two depth of anaesthesia monitors", presented at NAVat, Sep 2014.
6. U. Melia, E. Gabarrón, M. Agustí, N. Souto, P. Pineda, J. Fontanet, M. Vallverdú, E.W. Jensen and P. Gambús, "Comparison of the qCON and qNOX indices for the assessment of unconsciousness level and noxious stimulation response during surgery", Journal of Clinical Monitoring and Computing, vol. 30, no. 6, pp. 1273-1281, Oct 2016.
7. Evaluation von qCon, einem neuen Narkosetiefemonitor: (Wuppertal), Robert Zanner, (München), Matthias Kreuzer, Meyer, Adrian, Kochs, Eberhard, Schneider, Gerhard, Düsseldorf: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie & Intensivmedizin, 2015. 13.55 - 14.10.

Aktuelle Veröffentlichungen

I.Serra, U. Melia, E.W. Jensen, PL. Gambús, "Monitoring Depth of Anaesthesia with the Conox", Presented at 27th Annual meeting of ISAP, October 2018.
P. Martinez-Vazquez, X. Wang, J. Zhang, W. Qi, C. Nie, B. Liu, Z. Tian, G. Zhao, T. Wang, "The Nociception index (qNOX) correlated with hypothermia during Cardiopulmonary bypass", presented at 26th Annual meeting of ISAP, Oct 2018.
A.L. Ferreira, C. Nunes, J.G. Mendes, P. Amorim, "¿Contamos actualmente con un método fiable para detectar el momento de pérdida de consciencia durante la inducción de la anestesia?", Revista Española de Anestesiología y Reanimación, Jun 2018.
PA. Stöckle, P. Richebé, "Le monitoring de la douleur peropératoire: actualités et perspectives", Anesthésie & Réanimation, vol. 4, Issue 3, pp. 204-14, May 2018.
D.H. Kim, J.Y. Yoo, J.Y. Kim, S.H. Ahn, S. Kim, S.K. Min, "Influence of electrocautery-induced electromagnetic interference on quantitative electroencephalographic monitoring of hypnosis during general anaesthesia: comparison between the ADMS® and the BIS VISTA™", Korean Journal of Anesthesiology, Apr 2018.
A. Abad-Gurumeta, J. Ripollés-Melchor, R. Casans-Francés, J.M. Calvo-Vecino, "Monitorización de la nocicepción, ¿realidad o ficción?", Revista Española de Anestesiología y Reanimación, vol. 64, Issue 7, pp. 406-414, August-September 2017.

Lesen Sie die neusten klinischen Studien zu Conox auf:
http://quantummedical.com/clinical-results/qcon-clinical-results/

Conox und das Conox-Logo sind eingetragene Marken von Fresenius Kabi in ausgewählten Ländern. Aufgrund ständiger Produktverbesserung sowie Umstellung in den Standards sind bei den hier beschriebenen Merkmalen Änderungen vorbehalten. Für aktuelle Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



Conox® 2D
Anästhesie Monitoring



Conox ist ein Monitor zur nicht-invasiven Überwachung der Narkosetiefe und Messung der hypnotischen und analgetischen Wirkung einer Vollnarkose.


Zwei Überwachungslösungen in einem Gerät

Fortschrittliche digitale Verarbeitungsalgorithmen zur intelligenten Narkoseüberwachung.

Klinischer Zustand

qNOX	
61-99	Patient reagiert wahrscheinlich auf äussere Reize
40-60	Patient reagiert mit geringer Wahrscheinlichkeit auf äussere Reize
0-39	Patient reagiert mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit auf äussere Reize


qCON	
80-99	Wachzustand
61-79	Sedierung oder leichte Narkose
40-60	Allgemeinnarkose
0-39	Tiefe Narkose

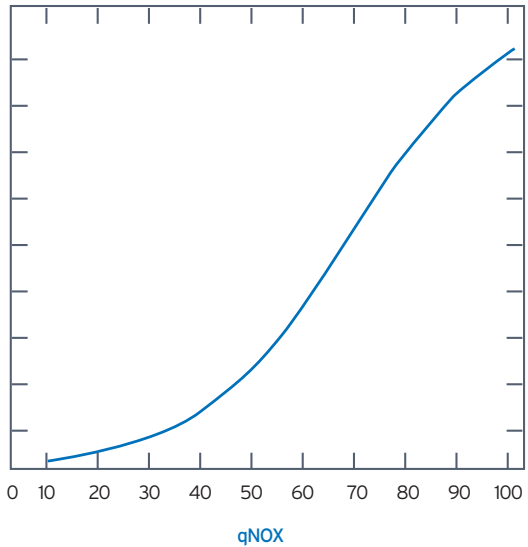

⁴ E.W. Jensen, J.F. Valencia, A. López, T. Anglada, M. Agustí, Y. Ramos, R. Serra, M. Jospin, P. Pineda and P. Gambús. "Monitoring hypnotic effect and nociception with two EEG-derived indices, qCON and qNOX, during general anaesthesia", *Acta Anaesthesiologica Scandinavica*, vol. 58(8), pp. 933-941, Sep 2014.

Conox Sensor


Sowohl die Narkosetiefe als auch Veränderungen des Bewusstseinszustands lassen sich mit einem Sensor messen und beurteilen.

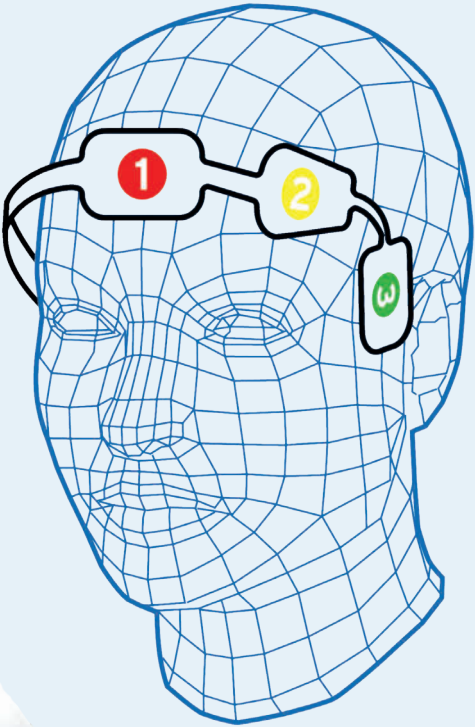

- Einweg-Sensor für Kinder oder Erwachsene
- Nassgel-Design
- vollständig nicht-invasiv
- lange Nutzungsdauer
- Latexfrei



Speicher- und Anzeigefunktionen

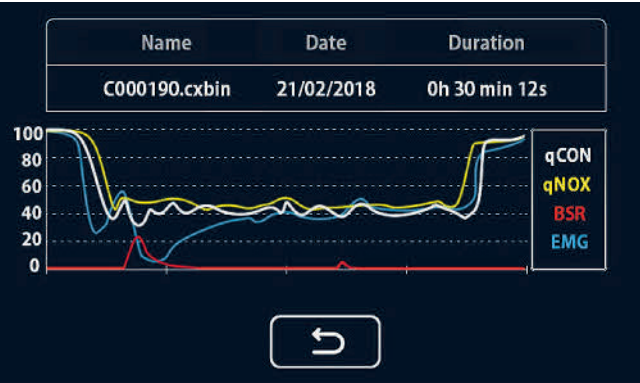

- Speicherung des aktuellen Falls im Conox-Datenspeicher
- Organisation der gespeicherten Fälle im Gerät
- Anzeige der Conox-Indizes für einen gespeicherten Fall

ConoxView Apps

- Verbindung über Bluetooth®
- Anzeige der Conox-Indizes und des Spektrogramms für den aktuellen Fall auf einem Windows-, Android- oder iOS-Gerät
- Speicherung des Falls auf einem Smartphone, Tablet oder PC

